



# Beschleunigung

Schnelleres Arbeiten mit der Eppendorf Easypet® 3  
und den neuen serologischen Pipetten



## Erleben Sie eine neue Dimension des Pipettierens


### Erleben Sie mit der Eppendorf Easypet® 3 eine neue Dimension des elektronischen Pipettierens.

In die Easypet 3 sind die neuesten technologischen Entwicklungen eingeflossen. Jetzt wird die Pipettiergeschwindigkeit einfach per Fingerdruck kontrolliert, wobei sich der Meniskus deutlich feinfühler steuern lässt. Der leistungsstarke Motor sorgt für ein effizientes und schnelles Pipettieren großer Volumina, bietet aber auch bei kleineren Volumina größtmögliche Kontrolle.

Bei der Entwicklung der 160 Gramm leichten, ergonomischen Easypet 3 wurde insbesondere darauf geachtet, dass sie bequem in der Hand liegt und mit ihrer Form ein ermüdungsfreies Pipettieren unterstützt. Die Easypet 3 kann mit serologischen Pipetten und Vollpipetten jeden Typs von 0,1–100 mL Volumen eingesetzt werden.

### Weitere Produktmerkmale:

- > Stufenlose Einstellung der Pumpengeschwindigkeit
- > Lithium-Polymer-Batterie für langes kabelloses Arbeiten ohne Memory-Effekt
- > Anzeige des Batterieladestandes
- > Weiterarbeiten beim Aufladen möglich
- > Autoklavierbarer Pipettenadapter für sterile Anwendungen
- > Aufnahmekonus mit Schnellkopplung erleichtert das Auswechseln der Membranfilter
- > Ein Druckausgleichssystem verhindert, dass angesaugte Dämpfe in das Gerät eindringen und Korrosion verursachen

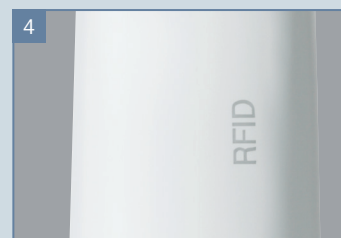

### **Geschwindigkeitskontrolle und Präzision**

Intuitive und bequeme Geschwindigkeitseinstellung einfach per Fingerdruck. Die neue Ventiltechnologie erhöht die Präzision durch eine feinfühligere Steuerung des Meniskus.

### **Ergonomie**

Leichtes, ergonomisches Design für stressfreies Arbeiten dank konsequenter Umsetzung unseres PhysioCare Concepts®.

### **Anzeige des Batterieladestandes**

Gut sichtbare, beleuchtete LEDs zeigen die Batterie-Restlaufzeit an.

### **RFID inklusive**

RFID-Chip und Eppendorf TrackIT-System für einfache Inventarisierung.







»Easypet® 3 – nie war es einfacher, Geschwindigkeit mit Sicherheit, Präzision und Komfort zu verbinden.«



»Bei der Entwicklung der Easypet 3 haben wir stets an unsere Anwender gedacht. Durch die Verbindung der Geschwindigkeitseinstellung mit unserer neuen Ventiltechnologie, die eine feinfühlere Einstellung des Meniskus ermöglicht, wollen wir ihre tägliche Arbeit erleichtern.«

**Tobias David**, Projektmanager Produktentwicklung  
Eppendorf Liquid Handling

## Technische Daten

Akkumulatortyp	Lithium-Polymer-Batterie
Kapazität	1.100 mAh/3,7 V
Ladezeit	~3 h
Anzahl der Dosiervorgänge	~2.000 (mit 25-mL-Pipette)
Gewicht ohne Akkumulator und Pipette	134 g (0,295 lb)
<b>Netzanschluss</b>	
Eingangsspannung	100–240 V AC, ±10 %, 50–60 Hz, 0,5 A
Ausgangsspannung	5 V DC, 1,0 A

## Bestellinformationen

Beschreibung	Bestell-Nr. (international)
Eppendorf Easypet® 3 inkl. Netzteil und Lithium-Polymer-Batterie, Wandhalter, Ablageständer, 2 Membranfilter (unsteril) 0,45 µm	4430 000.018
<b>Zubehör</b>	
Membranfilter, steril, 0,45 µm, 5 Stück	4421 601.009
Membranfilter, steril, 0,2 µm, 5 Stück	4430 606.005
Lithium-Polymer-Batterie für Eppendorf Easypet® 3	4430 605.009
Wandhalter	4430 604.002
Eppendorf TrackIT, bestehend aus Software und RFID-Lesegerät	3903 000.014
Eppendorf Pipet Helper®	4423 000.010
<b>Serologische Eppendorf-Pipetten</b>	
<b>steril, frei von nachweisb. Pyrogenen, DNA, RNase und DNase, nicht-zytotoxisch</b>	
■ 1 mL, gelb, 800 Stck. (4 Beutel × 200 Stck.)	0030 127.692
■ 2 mL, grün, 600 Stck. (4 Beutel × 150 Stck.)	0030 127.706
■ 5 mL, blau, 400 Stck. (4 Beutel × 100 Stck.)	0030 127.714
■ 10 mL, orange, 400 Stck. (4 Beutel × 100 Stck.)	0030 127.722
■ 25 mL, rot, 200 Stck. (4 Beutel × 50 Stck.)	0030 127.730
■ 50 mL, lila, 160 Stck. (4 Beutel × 40 Stck.)	0030 127.749

### Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · 50389 Wesseling-Berzdorf · Germany  
 vertrieb@eppendorf.de · [www.eppendorf.de](http://www.eppendorf.de)  
 Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria  
 eppendorf@eppendorf.at · [www.eppendorf.at](http://www.eppendorf.at)  
 Vaudaux-Eppendorf AG · 4124 Schönenbuch · Switzerland  
 eppendorf@eppendorf.ch · [www.eppendorf.ch](http://www.eppendorf.ch)

[www.eppendorf.com/easypet](http://www.eppendorf.com/easypet)