



# Well within Reach

Das Eppendorf Pipettenhaltersystem



## Pipettenständer 2 und Ladeständer 2



Schützen Sie Ihr kostbares Liquid Handling-Instrument vor möglichen Schäden, Verschmutzungen oder auf der Arbeitsfläche verschütteten Chemikalien. Die Ständer für einzelne Geräte haben ein robustes Design und nehmen ein manuelles oder elektronisches Gerät sicher auf. Mit dem Ladeständer 2 sind Ihre Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Xplorer plus oder Multipette® E3/E3x immer vollständig geladen und betriebsbereit. Der völlig neue Pipettenständer 2 nimmt eine Eppendorf Multipette M4 auf. Dieser Ständer eignet sich ebenfalls perfekt für eine Ein- oder Mehrkanal-Eppendorf Research® plus oder Eppendorf Reference® 2 Pipetten, wenn er mit dem optionalen Pipettenhalter verwendet wird.



## Perfektion bis ins kleinste Detail

Drehbare Pipettenhalter nehmen alle aktuellen manuellen Eppendorf Pipetten und die meisten Vorgängermodelle auf.



Die Pipettenhalter und Ladeschalen sind mit Piktogrammen gekennzeichnet, damit sie im Labor leicht zugeordnet werden können.



Schnell austauschbare Pipettenhalter und Ladeschalen, kein Werkzeug erforderlich.



Abwärtskompatible Halter für manuelle Pipetten aus den Reihen Eppendorf Research und Reference.



Der große Tragegriff ermöglicht den einfachen Transport der Karussells zwischen den Arbeitsbereichen.



Große Gummifüße schützen die Karussells und Ständer vor auf der Arbeitsfläche verschütteten Flüssigkeiten.



## Pipettenhalter 2 und Ladeschale 2


Wählen Sie aus dem großen Haltersortiment für alle aktuellen manuellen und elektronischen Eppendorf Liquid Handling-Instrumente sowie für die meisten ihrer Vorgänger. Platzen Sie Ihre Pipette und Multipipette dort, wo Sie sie brauchen: An der Wand, am Regal

über Ihrer Arbeitsfläche oder in einer biologischen Sicherheitswerkbank. Zusätzlich können alle Halter in das Pipettenkarussell 2 eingesetzt werden. Ladeschalen zur Installation in das Ladekarussell 2 sind ebenfalls erhältlich.

Robuste elektrische Kontakte, ausgelegt für eine lange Betriebsdauer, ohne dass sie ersetzt werden müssen.

V-förmige Ladekontakte gewährleisten eine stabile elektrische Verbindung zwischen der Ladeschale und dem elektrischen Gerät.

Die Kabelaufwicklung für ungenutztes Stromkabel sorgt für eine ordentliche und aufgeräumte Arbeitsfläche.

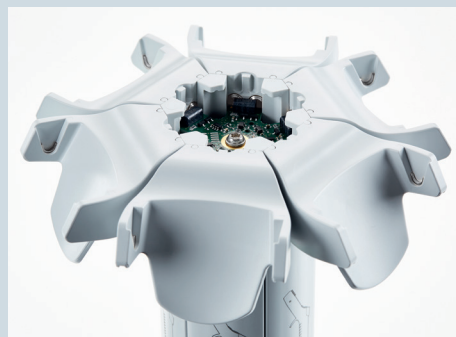

Mit einem Durchmesser von nur 18,5 cm sind die Ständer und Karussells ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Die intelligente Ladeelektronik überwacht bis zu sechs Eppendorf Xplorer-Pipetten oder elektronische Multipipetten.

Der sich schnell lösende magnetische Ladestecker schützt Pipetten und Multipipetten vor dem Herabfallen.

# Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2

Bewahren Sie all Ihre Eppendorf-Pipetten und Multipipetten immer griffbereit auf. Das Pipettenkarussell 2 für manuelle Pipetten sowie das Ladekarussell 2 für elektronische Geräte bieten mehr Flexibilität und Kapazität als je zuvor.

Das Eppendorf Pipettenkarussell 2 trägt bis zu sechs manuelle Ein- oder Mehrkanal-Pipetten. Dabei können die einzelnen Pipettenhalter in zwei um 180° gedrehten Orientierungen am Karussell montiert werden und fassen so alle aktuellen manuellen Pipettenmodelle sowie die meisten Vorgänger, darunter Eppendorf Research, Research plus, Reference, Reference 2 und Biomaster®.

Das Ladekarussell 2 bietet 50% mehr Kapazität als zuvor und fasst bis zu sechs elektronische Eppendorf Xplorer oder Xplorer plus-Pipetten. In Verbindung mit den optionalen Ladeschalen kann das Ladekarussell auch bis zu sechs Eppendorf Multipipette E3/E3x oder Multipipette stream/Xstream aufnehmen. Außerdem ist das Ladekarussell 2 nicht nur perfekt für elektronische Geräte geeignet, sondern auch für manuelle Eppendorf-Pipetten, wenn es mit den optionalen Pipettenhaltern verwendet wird.

## Mehr Flexibilität

- > Die Karussells nehmen alle Eppendorf-Pipetten und Multipipetten auf
- > Alle manuellen Eppendorf-Pipetten passen in einen drehbaren Halter



## Mehr Kapazität

- > Ladekarussell 2 für bis zu sechs elektronische Geräte
- > Die Karussells nehmen sowohl manuelle als auch elektronische Geräte auf

## Mehr Komfort

- > Austauschbare Pipettenhalter, kein Werkzeug erforderlich
- > Kabelaufwicklung für ungenutztes Stromkabel

## Mehr Anwendersicherheit

- > Magnetischer Ladestecker zum schnellen und einfachen Anschließen
- > Große Gummifüße schützen die Karussells vor auf der Arbeitsfläche verschütteten Flüssigkeiten



> Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.eppendorf.com/pipetteholder](http://www.eppendorf.com/pipetteholder)

## Bestellinformationen

Bezeichnung	Best.-Nr.
<b>Pipettenkarussell 2</b> , für 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 oder Biomaster®, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich	3116 000.015
<b>Ladekarussell 2</b> , für 6 Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, inklusive Steckernetzteil mit Magnetkontakt, zusätzliche Ladeschalen und Pipettenhalter sind optional erhältlich	3116 000.023
<b>Ladeständer 2</b> , für eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, Betrieb mit dem im Lieferumfang der Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus enthaltenen Steckernetzteil	3116 000.031
<b>Ladeständer 2</b> , für eine Eppendorf Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, Betrieb mit dem im Lieferumfang der Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream enthaltenen Steckernetzteil	3116 000.040
<b>Pipettenständer 2</b> , für eine Eppendorf Multipette® M4, ohne Ladefunktion, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich	3116 000.058
<b>Pipettenhalter 2</b> , für eine Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 oder Biomaster®, für Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2 oder Wandmontage, inklusive Klebestreifen	3116 000.112
<b>Pipettenhalter 2</b> , für eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, für Pipettenkarussell 2 oder Wandmontage, inklusive Klebestreifen, ohne Ladefunktion	3116 000.120
<b>Pipettenhalter 2</b> , für eine Eppendorf Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, für Pipettenkarussell 2 oder Wandmontage, inklusive Klebestreifen, ohne Ladefunktion	3116 000.139
<b>Pipettenhalter 2</b> , für eine Eppendorf Multipette® M4, für Pipettenkarussell 2 und Ladekarussell 2 oder Wandmontage, inklusive Klebestreifen, ohne Ladefunktion	3116 000.147
<b>Ladeschale 2</b> , für eine Eppendorf Xplorer® oder Eppendorf Xplorer® plus, für Ladekarussell 2, mit Ladefunktion	3116 602.007
<b>Ladeschale 2</b> , für eine Eppendorf Multipette® E3/E3x oder Multipette® stream/Xstream, für Ladekarussell 2, mit Ladefunktion	3116 603.003

### Erfahren Sie mehr über das neue Pipettenhaltersystem

Das Eppendorf Pipettenhaltersystem bietet hochflexible Karussells, Ständer und Wandhalter für alle aktuellen manuellen und elektronischen Eppendorf Liquid Handling-Instrumente sowie die meisten ihrer Vorgänger.

> [www.eppendorf.com/pipetteholder](http://www.eppendorf.com/pipetteholder)



Your local distributor: [www.eppendorf.com/contact](http://www.eppendorf.com/contact)  
 Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Germany  
[eppendorf@eppendorf.com](mailto:eppendorf@eppendorf.com) · [www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

[www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)